

# PHARMASET

## SUERO FISIOLÓGICO

Solución isotónica estéril de cloruro de sodio al 0,9% en recipiente monodosis para la higiene de los ojos, la nariz, los oídos, el lavado de heridas y para inhalación.  
No inyectable

**INDICACIONES**

PHARMASET suero fisiológico está indicado para lactantes, niños y adultos:  
Para la higiene nasal: por instilación o lavado de la nariz seca u obstruida. Para la higiene ocular: por instilación, lavado o baño. Para la higiene auricular. Para el lavado de heridas. Para inhalación en aerosolterapia.

**Forma y Presentación**

Caja de 30 o 60 monodosis de 5 mL

**Composición**

Cloruro de Sodio 0,9 g; Agua purificada q.s. 100 mL Sin conservantes.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Lavarse cuidadosamente las manos antes de usar.  
Despegar un recipiente monodosis y abrirlo girando su parte superior.

**Para la higiene nasal y ocular**

Puede utilizarse diariamente para la higiene nasal y ocular, a razón de 1 a 6 lavados al día, en función de las necesidades.

Para la higiene de la nariz: por instilación o lavado de la nariz seca u obstruida

Inclinar la cabeza a un lado.  
Introducir delicadamente la punta abierta en el orificio nasal y apretar ligeramente la monodosis.  
Repetir la operación en el otro orificio nasal.  
Levantar la cabeza para dejar fluir la mucosidad y secar el excedente. No sonarse violentamente durante los 10 minutos siguientes a la administración.  
En el lactante, instilar el producto con la mínima presión para evitar todo riesgo de contaminación del oído medio.

Para la higiene de los ojos: por instilación, lavado o baño

Verter unas gotas de solución en cada ojo.  
Secar el excedente de líquido con una compresa estéril.  
No poner el recipiente de la monodosis en contacto con la superficie del ojo.  
En caso de utilización de otro producto de uso ocular, comenzar con PHARMASET suero fisiológico y esperar 15 minutos antes de su instilación.  
La solución es compatible con el uso de lentillas.

**Para la higiene auricular**

En enjuague. Para una perfecta higiene auricular, tras aplicar una solución tensoactiva auricular, utilizar el producto para evacuar los depósitos solubilizados de cerumen y enjuagar el conducto auditivo externo.  
Un recipiente monodosis puede utilizarse en las 2 orejas.  
Secar el excedente de líquido con una compresa.

**Para el lavado de heridas**

Enjuagar la herida utilizando toda la solución contenida en la monodosis.  
Secar el excedente de líquido únicamente sobre la piel sana. No poner el recipiente de la monodosis en contacto con la superficie de la herida.

**Para la inhalación en aerosolterapia**

Si la solución se utiliza como disolvente para inhalación en aerosolterapia, remitirse a las instrucciones indicadas en el producto a inhalar.  
Si la solución se utiliza sola, remitirse a las instrucciones indicadas en el aparato de aerosolterapia.  
Consulte a su médico en caso de primera utilización o en caso de hipersensibilidad respiratoria.

**PRECAUCIONES DE USO**

- Uso único e individual.
- Tras apertura: utilizar inmediatamente y desechar el recipiente monodosis tras su uso.
- No utilizar la misma monodosis para usos diferentes.
- No inyectar.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No utilizar una monodosis estropeada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No reutilizar una monodosis empezada anteriormente: al no contener conservantes, la reutilización de este dispositivo médico podría provocar riesgos por administración de una solución contaminada.



050055B  
104

PHARMASET suero fisiológico es un dispositivo médico de clase IIa estéril.  
Fecha de obtención de la marcación CE: 16/09/2016.  
Fecha de revisión de las instrucciones de uso: 09/2017.

Fabricante: Laboratoire UNITHER  
ESPACE INDUSTRIEL NORD  
151, Rue André Durouchez  
CS 28028  
80084 AMIENS Cedex 2  
FRANCE

Distribuido por: A.T.P. Farma S.L.  
C/ Oruro 8, 28016 Madrid (Spain)



050055B  
104



C.N. 1585103

# PHARMA SET

## SORO FISIOLÓGICO

Solução isotónica estéril de cloreto de sódio 0,9% em recipiente unidose para a higiene dos olhos, do nariz, dos ouvidos, a lavagem das feridas e para inalação. Não injetável

### INDICAÇÃO

PHARMASET soro fisiológico é adequado para recém-nascidos, crianças e adultos: Para a higiene nasal: em instilação ou em lavagem para as narinas secas ou obstruídas. Para a higiene ocular: em instilação, em lavagem ou em banho. Para a higiene auricular. Para a lavagem das feridas. Para a inalação em aerossolterapia.

### Forma e Apresentação

Caixa de 30 ou 60 unidoses de 5 mL

### Composição

Cloreto de sódio 0,9 g; Água purificada q.b. para 100 mL. Sem conservantes.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Lave cuidadosamente as mãos após utilização. Separe uma unidose e abra rodando a sua parte superior.

#### Para a higiene nasal e ocular

Pode ser utilizado diariamente para a higiene nasal e ocular, na proporção de 1 a 6 lavagem(ns) por dia, em função das necessidades.

Para a higiene nasal: em instilação ou em lavagem para as narinas secas ou obstruídas

Inclinar a cabeça para o lado. Introduzir delicadamente a extremidade na narina e pressionar ligeiramente a unidose. Repetir o procedimento na outra narina. Endireitar a cabeça para deixar escoar as mucosidades e, em seguida, limpar o excedente. Não se assoar intensamente durante os 10 minutos seguintes à administração. No recém-nascido, instilar o produto com uma pressão mínima de forma a evitar qualquer risco de contaminação do ouvido médio.

Para a higiene ocular: em instilação, em lavagem ou em banho

Depositar algumas gotas de solução em cada olho. Limpar o excedente de líquido com uma compressa estéril. Não colocar a unidose em contacto com a superfície do olho. Em caso de utilização de um outro produto para uso ocular, começar por utilizar PHARMASET soro fisiológico e aguardar 15 minutos antes da sua instilação. A solução é compatível com o uso de lentes de contacto.

#### Para a higiene auricular

Em lavagem. Para uma perfeita higiene auricular, após utilização de uma solução tensoativa auricular, utilizar o produto para evacuar os depósitos solúveis de cera e lavar o canal auditivo externo. Um recipiente unidose pode ser utilizado para os 2 ouvidos. Limpar o excedente de líquido com uma compressa.

#### Para a lavagem das feridas

Lavar a ferida utilizando a totalidade da solução contida na unidose. Limpar o excedente de líquido unicamente na pele saudável. Não colocar a unidose em contacto com a superfície da ferida.

#### Para a inalação em aerossolterapia

Se a solução for utilizada como solvente para inalação em aerossolterapia, consulte as instruções indicadas no produto a inalar. Se a solução for utilizada sozinha, consulte as instruções indicadas no aparelho de aerossolterapia. Procurar aconselhamento médico em caso de primeira utilização ou em caso de hipersensibilidade respiratória.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilização única e individual.
- Após abertura: utilizar imediatamente e descartar o recipiente unidose após utilização.
- Não usar a mesma unidose para as diferentes utilizações.
- Não injetar.
- Não utilizar após a data limite de utilização.
- Não utilizar uma unidose danificada.
- Não deixar ao alcance das crianças.
- Qualquer dose iniciada não deve ser reutilizada: como a solução não contém conservantes, a sua reutilização pode conduzir ao risco de administração de uma solução contaminada.

PHARMASET soro fisiológico é um dispositivo médico de classe IIa estéril. Data de obtenção da marcação CE: 16/09/2016 Data de revisão das instruções de utilização: 09/2017.

Fabricante: Laboratoire UNITHER  
 ESPACE INDUSTRIEL NORD  
 151, Rue André Durouchez  
 CS 28028  
 80084 AMIENS Cedex 2  
 FRANCE

Distribuído por: A.T.P. Farma S.L.  
 C/ Oruro 8, 28016 Madrid (Spain)



Client : **UNITHER GANNAT**

Article : **PHARMASET**

Réf. article : **050055B**

Couleurs recto :



P 285



Noir



Couleurs verso :



P 285



Edition n° : **1**

Date du BAT : **18/12/18**

### Informations technique :

Police :

—

Format :

**157 x 315 mm**

Format plié :

**157 x 27 mm**

Grammage :

—

Validation opérateur MPS :

*PG*

Si correction merci d'indiquer le nombre à effectuer :


Signature client pour validation :

Ce document a valeur de lecture de textes, graphiques et agencement des couleurs uniquement. Les teintes présentées ne sont qu'approximatives. Les couleurs du tirage seront les références mentionnées sur le BAT.

Nous attirons votre attention, sur le fait que votre signature sur les BAT engage votre responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions non signalées.

Merci de nous renvoyer ce document pourvu de vos remarques et le nombre de correction à effectuer, **à l'aide des post-it d'acrobat**, dans les plus brefs délais afin de ne pas retarder la livraison.

Bobine

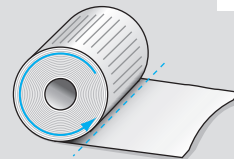


Sens d'enroulement :

R°

V°

A plat

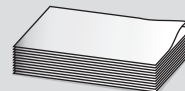

Plié

